

Лигатурные керамические брекететы Gemini Clear

Пропись MBT

Эстетика и эффективность

Брекететы Gemini от 3M известны по всему миру благодаря их качеству и эффективности. Теперь вы также можете предложить своим пациентам все эти качества, дополненные эстетикой керамических брекетов Gemini Clear.

Лигатурные керамические брекететы Gemini Clear обладают эстетикой, которая так важна для пациентов. Они выполнены из прочного прозрачного керамического материала, который подстраивается под цвет эмали зубов и позволяет пациентам любого возраста улыбаться уверенно на протяжении всего ортодонтического лечения. Дизайн брекетов обеспечивает комфорт при ношении, скругленные углы, куполообразная форма брекета и гладкие двунаправленные крючки не травмируют слизистую оболочку полости рта пациента.

Ключевые особенности

- Дизайн широкого брекета с четырьмя лигатурными крыльями обеспечивает хороший контроль ротаций¹
- Выраженное подкрыльное пространство позволяет легко проводить лигирование
- Торк в базе обеспечивает выравнивание пазов брекетов и легкую установку дуг
- Фланец основания способствует легкому удержанию и позиционированию брекета²
- Надежная сила фиксации брекета достигается за счет микрокристаллического основания³
- Доступность брекетов с преднанесенным адгезивом APC II снижает количество этапов процедуры фиксации и экономит время⁴



Легкое снятие брекетов с концентратором напряжения от 3M


Керамические брекететы Gemini Clear имеют специально разработанный компанией 3M концентратор напряжения, обеспечивающий легкость и предсказуемость снятия. Наслаждайтесь процедурой дебондинга брекета путем его мезио-дистального сжатия.



MBT™
Versatile+ Appliance System



Используйте ваши любимые светоотверждаемые или адгезивы химического отверждения, или выбирайте брекететы с преднанесенным адгезивом APC II, они позволят сэкономить время и уменьшить количество этапов фиксации⁴. Брекететы с преднанесенным адгезивом APC II исключают этап его нанесения и облегчают идентификацию брекета при фиксации. Каждый такой брекет имеет индивидуальную упаковку с указанием прописи и соответствия зубу.

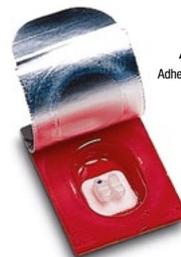

APC™ II
Adhesive Coated Appliance System

Керамические лигатурные брекететы Gemini Clear – это сочетание эстетики и эффективности, которое дает вашим пациентам эстетичное лечение и ожидаемый результат.

Лигатурные керамические брекететы Gemini Clear



APC™ II
Adhesive Coated Appliance System

MBT™
Versatile+ Appliance System

Пропись MBT - .022 in.

Верхняя челюсть			IN/OUT		M/D	Номер по каталогу – .022 in.	
Зуб	Торк	Ангуляция	in.	mm	Ширина	L	R
Центральный резец	+17	4	.044	1.12	3.5	117-301	117-302
Боковой резец	+10	8	.058	1.47	3.0	117-303	117-304
Клык, крючок	0	8	.041	1.04	3.5	117-305	117-306
Премоляр, крючок	-7	0	.041	1.04	3.5	117-307	117-316
Нижняя челюсть							
Зуб	Торк	Ангуляция	in.	mm	Ширина	L	R
Резец	-6	0	.060	1.52	2.5	117-308	
Клык, крючок	0	3	.031	0.79	3.5	117-309	117-310
1-й премоляр, крючок	-12	2	.041	1.04	3.5	117-311	117-312
2-й премоляр, крючок	-17	2	.041	1.04	3.5	117-313	117-314

Если вы хотите заказать брекететы с преднанесенным адгезивом APC II, необходимо начинать артикул с цифры «3»

Наборы для пациентов

Набор для пациента – 5x5	Номер по каталогу – .022 in.
U/L 5x5 с крючками	117-100
Набор для пациента – 3x3	
U 3x3 с крючками	117-102
U/L 3x3 с крючками	117-104

Если вы хотите заказать брекететы с преднанесенным адгезивом APC II, необходимо начинать артикул с цифры «3»



Источники:

1. Лабораторные данные компании 3M; October 2006, ref. number 2006 – S10021.
2. Лабораторные данные компании 3M; May 2011, ref. number 2010 – S10449.
3. Лабораторные данные компании 3M; June 2012, ref. number 2010 – S10486.
4. Лабораторные данные компании 3M; May 2011, ref. number 2009 – S10346.

3M

Уполномоченный представитель
на территории РФ АО «3М Россия»:
108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш, 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный центр Comcity

Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru

Товар зарегистрирован на территории РФ.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь
с инструкцией. Для распространения
на мероприятиях для медицинских работников.